


Eight-Lobe Pro **SAG** & *BiO*[®] *Implant*



Drilling Progression for Eight-Lobe Pro

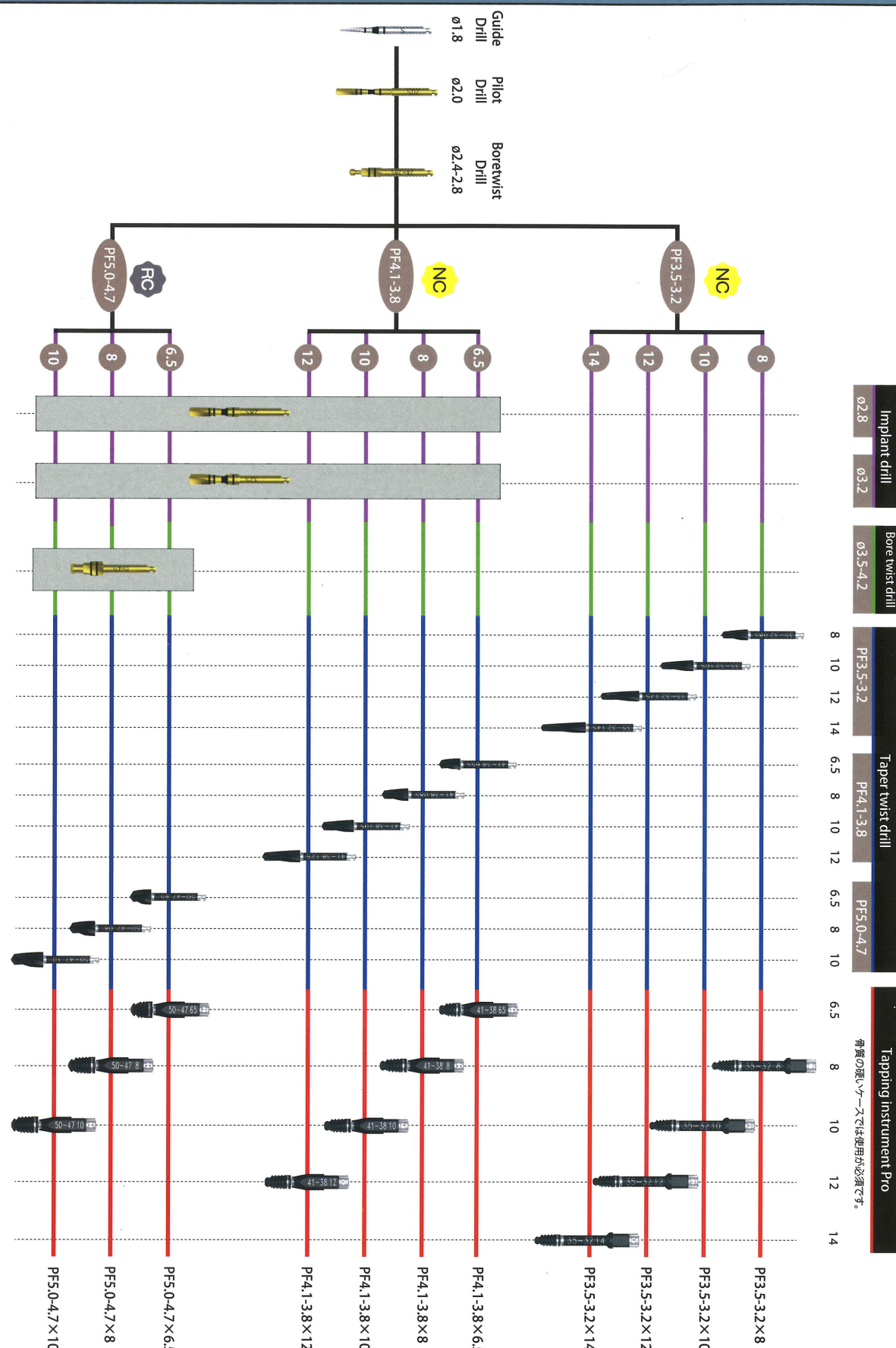

お問い合わせ
ご注文

<http://www.platonjapan.co.jp>
PLATON JAPAN

本社 〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56 鶴川アカデメイアビル
 TEL: 042-734-8088 (代) FAX: 042-734-1109




TEL : 0120-36-8950
 FAX : 0120-36-8952


営業所 大阪・名古屋・九州

Eight-Lobe Pro SAG & BiO


Eight-Lobe Implant のインターナルコネクションを採用した
Eight-Lobe Pro **SAG** & **BiO**

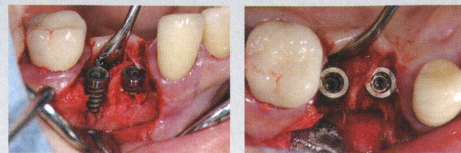

写真提供: はやし歯科医院 林 正人 先生

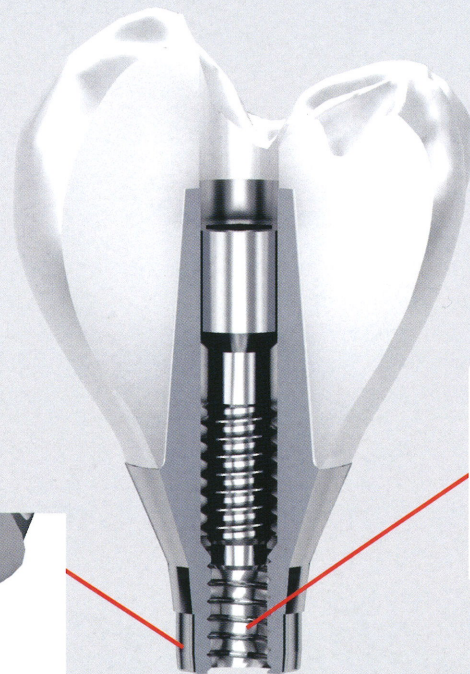


Removal Screw
アバットメントリリース用の内ねじ加工が施されている
ことでリリース時の作業が容易。

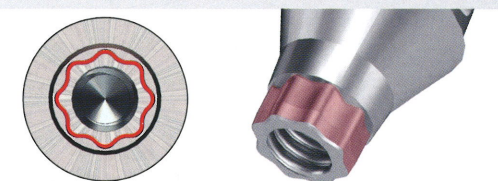


6° テーパーと 8 枚の花びら構造によるインターナルコネクションが高トルクでの埋入、回転防止効果を発揮。


日本の精密機械加工技術

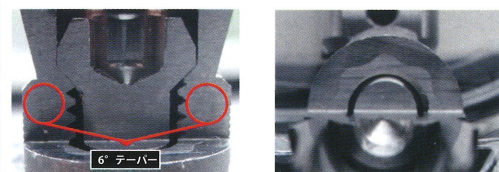

精密に一体化することで高いシール性を発揮
回転公差の小さいエイトローブ形状は回転防止による
長期安定性を実現。

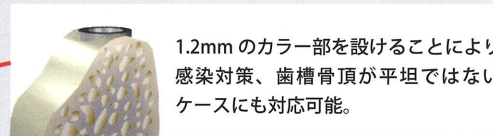

1.2mm のカラー部を設けることにより
感染対策、歯槽骨頂が平坦ではない
ケースにも対応可能。

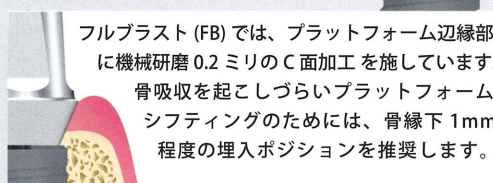


フルブラスト (FB) では、プラットフォーム辺縁部
に機械研磨 0.2 ミリの C 面加工を施しています。
骨吸収を起こしづらいプラットフォーム
シフティングのためには、骨縁下 1mm
程度の埋入ポジションを推奨します。

エイトローブ Pro インプラントは
症例に応じて選択可能な
表面性状の異なる 2 タイプをラインナップ

オッセオインテグレーション

ナノメートルレベルでコントロールされた表面微小構造
と GDT (グロー放電処理) 効果により、早期の骨形成、強固
な骨結合を実現。


SAG
Sand-blasting
Acid Etching
Glow Discharge Treatment

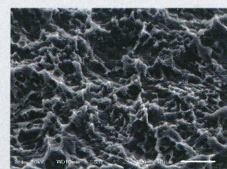

アクティブインテグレーション

埋入初期ではハイドロキシアパタイトの骨伝導能
によって早期の骨結合を促す。

BiO
Hydroxyapatite
film coating

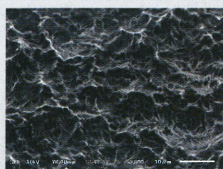

Eight-Lobe Pro SAG & BiO

NC ナローコネクション

RC レギュラーコネクション

NC はプラットフォーム径 $\phi 3.5$ と $\phi 4.1$ をラインナップ


RC はプラットフォーム径 $\phi 5.0$ をラインナップ

NC と RC では、それぞれ専用の埋入ツール類、キャップ類、アバットメント類を使用するため、相互に互換性はございません。

Eight-Lobe Pro Line-up

販売名: Eight-Lobe Pro インプラント SAG 一般的名称: 歯科用インプラントフィクスチャ クラス分類: 高度管理医療機器 製造販売元: (株)プラトンジャパン 医療機器製造販売承認番号: 22700BZX00096000
販売名: Eight-Lobe Pro インプラント BiO 一般的名称: 歯科用インプラントフィクスチャ クラス分類: 高度管理医療機器 製造販売元: (株)プラトンジャパン 医療機器製造販売承認番号: 22700BZX00005000


Collar 1.2mm

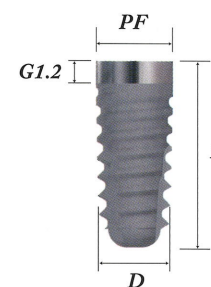

		全長 (L)	SAG 製品コード	価格 (円)	BiO 製品コード	価格 (円)
NC	<i>Eight-Lobe Pro PF3.5-3.2 NC</i>	8mm	ELP350-S080	19,000	ELP350-H080	25,000
		10mm	ELP350-S100		ELP350-H100	
		12mm	ELP350-S120		ELP350-H120	
		14mm	ELP350-S140		ELP350-H140	
NC	<i>Eight-Lobe Pro PF4.1-3.8 NC</i>	6.5mm	ELP410-S060	19,000	ELP410-H060	25,000
		8mm	ELP410-S080		ELP410-H080	
		10mm	ELP410-S100		ELP410-H100	
		12mm	ELP410-S120		ELP410-H120	
RC	<i>Eight-Lobe Pro PF5.0-4.7 RC</i>	6.5mm	ELP500-S060	19,000	ELP500-H060	25,000
		8mm	ELP500-S080		ELP500-H080	
		10mm	ELP500-S100		ELP500-H100	

コネクションタイプ
プラットフォーム径 (PF) 根尖スレッド外径 (D)

Full Blast (FB)

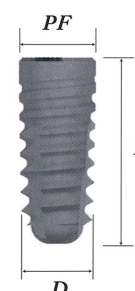

		全長 (L)	SAG 製品コード	価格 (円)	BiO 製品コード	価格 (円)
NC	<i>Eight-Lobe Pro PF3.5-3.2 FB NC</i>	8mm	ELP35F-S080	19,000	ELP35F-H080	25,000
		10mm	ELP35F-S100		ELP35F-H100	
		12mm	ELP35F-S120		ELP35F-H120	
NC	<i>Eight-Lobe Pro PF4.1-3.8 FB NC</i>	6.5mm	ELP41F-S060	19,000	ELP41F-H060	25,000
		8mm	ELP41F-S080		ELP41F-H080	
		10mm	ELP41F-S100		ELP41F-H100	
		12mm	ELP41F-S120		ELP41F-H120	
RC	<i>Eight-Lobe Pro PF5.0-4.7 FB RC</i>	6.5mm	ELP50F-S060	19,000	ELP50F-H060	25,000
		8mm	ELP50F-S080		ELP50F-H080	
		10mm	ELP50F-S100		ELP50F-H100	

Eight-Lobe Pro Abutment Line up

Eight-Lobe Pro インプラントには Eight-Lobe Implant シリーズのアバットメントが使用できます。



Eight-Lobe Pro 埋入ツール

Narrow Connection

NC

ELグリップNC

サイズ

全長(L)

商品コード

価格(円)

S

21.0mm

ELCAGR-NC210

10,000

M

28.0mm

ELCAGR-NC280

ELハンドツールNC

サイズ

全長(L)

商品コード

価格(円)

S

15.0mm

ELHDTL-NC150

10,000

L

23.0mm

ELHDTL-NC230

Regular Connection

RC

ELグリップRC

サイズ

全長(L)

商品コード

価格(円)

S

21.0mm

ELCAGR-RC210

10,000

M

28.0mm

ELCAGR-RC280

ELハンドツールRC

サイズ

全長(L)

商品コード

価格(円)

S

15.0mm

ELHDTL-RC150

10,000

L

23.0mm

ELHDTL-RC230

販売名: プラトン・インプラント・ツール 一般的名称: 電動式歯科用インプラント手術器具 クラス分類: 管理医療機器 製造販売元: (株)プラトンジャパン 医療機器製造販売承認番号: 223AGBZX00166000
販売名: ELハンドツール 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具 クラス分類: 一般医療機器 製造販売元: (株)プラトンジャパン 医療機器製造販売承認番号: 13B1X10081000023