

# Adjustable Abutment

アジャスタブルアバットメント

CAD/CAMの技術を利用したカスタムアバットメント

チタンブロックからの削り出し、強度について圧倒的な優位性を持つフリーデザインアバットメント



プラトンインプラント対応

Platon Implant System TypeIV



EL インプラントシステム対応

ナロープラットフォーム (NP) / レギュラープラットフォーム (RP)

オフィシャルラボだから出来る高品質な再現性  
前歯から大白歯まで部位を選ばず高い強度と審美性に対応  
トータルバリューはキャストブルアバットメントより経済的  
生体親和性に優れたチタンを使用



TypeIV



EL インプラント  
ナロープラットフォーム



EL インプラント  
レギュラープラットフォーム



カスタムマグネット

※ GC 社製ギガウス KB セット  
が別途必要

トランスファー印象を行なった後は、全てテクニカルセンターへお任せください  
印象・模型到着後、中4日でオーダーメイドのアバットメントを医院・ラボへ  
技工所でレジンアップを行なった物にも対応

CAD/CAM で加工するためのモデルとなるレジンアップ・ワックスアップをするベースとなるアバットメント

## テンポラリーシリンダー Pro



インプラントとのインターフェイス部にインターナル  
HEX が付与されているプラトンインプラントシステム  
Type IV 専用のベースとなるアバットメントです。

(セットスクリュー付き)

販売名 : プラトン ゴールドシリンダー  
一般的名称 : 歯科インプラントアバットメント (高度管理医療機器)  
製造販売業者 : (株)ヨシオカ  
医療機器製造販売承認番号 : 21700BZZ00438000 材質 : チタン製

## EL ワキシングベース NP / EL ワキシングベース RP



インプラントとのインターフェイス部にハイブリッド  
エイトローブコネクションが付与されている EL イン  
プラント専用のベースです。(口腔内では使用できません)

(技工用アバットメントスクリュー別売)

販売名 : ELワキシングベース  
一般的名称 : 歯科インプラント技工用器材 (一般医療機器)  
製造販売業者 : (株)プラトンジャパン  
医療機器製造販売届出番号 : 13B1X10081000032 材質 : ステンレス製

ご不明な点、詳細についてはテクニカルセンターまでお問い合わせください。

プラトンテクニカルセンター  
**PLATON TECHNICAL CENTER**

〒195-0062 東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデメイアビル

TEL : 042-737-3580 FAX : 0120-36-8952

(社) 日本口腔インプラント学会  
インプラント専門技工士 松本伸一

## PRESCRIPTION FORM

発注日 年 月 日

ご担当歯科医院名

ご担当歯科医師名

ご住所・電話番号 〒 □□□□ □□□□

補綴物製作ご担当技工所名

ご担当技士名

ご住所・電話番号 〒 □□□□ □□□□

TEL ( ) -

 納品先  請求先どちらかに必ず  チェックを付けて下さい。

TEL ( ) -

 納品先  請求先

## 送付物・預け物

 模型  レジンアップ  スクリュー  
 その他 ( )

患者様名

・性別 (男・女) ・年齢 歳

・カルテ番号

8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8  
8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8

備考欄

右記の注意事項をすべて承諾のうえ注文いたします。



 はい

## テクニカルセンター記入欄

受注番号 ファイル名

受注日 担当営業

## ご依頼内容

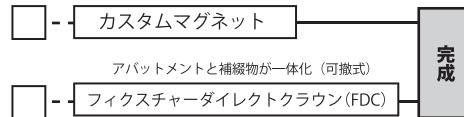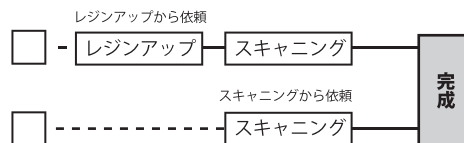

## ご使用されたインプラント

## プラトンスタンダード

Type IV  PFø4.1  PFø5.0

## ELインプラントシステム

Narrow  PFø3.4  PFø3.7Regular  PFø4.1  PFø4.6  PFø5.1

## 模型送付先

## プラトンテクニカルセンター

〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56 鶴川アカデメイアビル

お問い合わせ・ご質問は TEL: 042-737-3580

ご注文にあたっては下記の注意事項をよくお読み頂き、ご了承の上で注文ください。

- アジャスタブルアバットメント及びフィクスチャーダイレクトクラウン、カスタムマグネットの製作にあたっては、当テクニカルセンターへの再委託につきご担当歯科医師の了解の下、注文書の必要事項 (担当歯科医師名、歯科医院名、連絡先) を必ず記入の上、ご発注下さい。
- 納期は弊社到着日を含め4日で発送いたします。(ただし弊社午前中着分のみ。午後到着分につきましては1営業日を追加した日数にてご発送いたします。)
- 3本以上の症例は出来る限りレジンパターン完成後のご依頼をお願いします。複数本のレジンパターン作製からご依頼の場合、3~5本の症例は1日、6本以上の症例は2日、納期がプラスされますことご了承下さい。
- ご依頼いただきましたアジャスタブルアバットメント及びフィクスチャーダイレクトクラウン、カスタムマグネットのご請求に関して、ご請求先チェックボックスにチェックの無い場合は、納品先へご請求申し上げます。
- お送りいただいた個人情報は当センターにおける受託サービスにのみ使用いたします。

## 【アジャスタブルアバットメント注意点】

- アジャスタブルアバットメント及びフィクスチャーダイレクトクラウン、カスタムマグネットの製作可能なサイズは、1辺12mmの立方体に入るものとなっております。
- インプラントトップよりアンダー領域のフィクスチャーダイレクトクラウンの製作は不可能となります。
- レジンパターンのご送付時には、パターンの破損防止のため緩衝材等をお使いください。
- フルマウス症例や咬合関係が模型だけで判断出来ない症例は、咬合床を使用した咬合採得をお願いする場合がございます。(テクニカルセンターでも作製します)
- お送りいただきましたレジンパターンは、返却時には作業上の理由により加工または破損した状態でお返しすることがございますのであらかじめご了承の上、ご注文ください。
- 製作工程上、不明な点がある場合には、当センターよりお電話にてご確認ください。ご了承下さい。
- ご要望に応じてレジンパターンの状態で写真をお送りいたしますので備考欄にメールアドレスの記載をお願いします。当センターにてレジンアップを行う場合、特にご要望が無い場合にはそのまま製作いたします。(写真をお送りする場合には納期の調整が必要になる場合がございます)

