


お客様各位

ヘックドライバー仕様変更のお知らせ

プラトンシステムでは、ユーザーである臨床医の意見を製品開発に反映しております。その一環として、このたびヘックドライバーについて仕様を変更し、あわせて商品コードを変更致しましたので、お知らせ致します。


2008年9月製造分より順次変更しますので、しばらくは新旧製品が併売されます。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

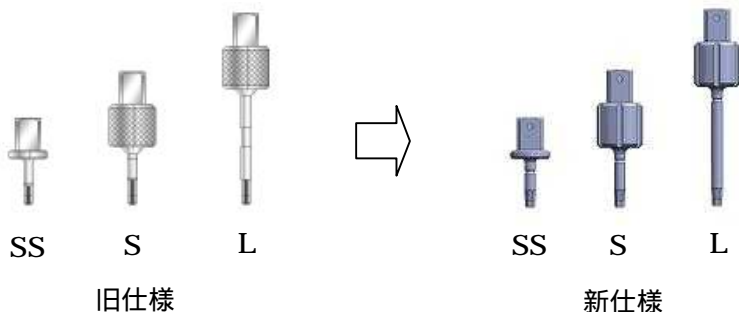

操作性向上のため、ローレット加工からスリット形状へ変更（S・Lのみ）
材質をチタン合金からステンレスへ変更致しました。

⚠️ ご注意

本品をご使用の際は、適切なトルクコントロールを行い、締め付けトルクが過重にかからないようご注意ください。
過重トルクによるセットスクリューの変形等防止の為、50N・cm程度のトルクが加わると図の矢印部分よりねじ切れるように設計してあります。

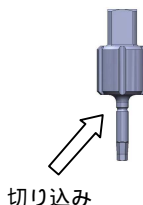

サイズ	全長	旧コード	新コード	価格
ヘックドライバー SS	13.5 mm	400-00SS	401-00SS	6,500 円
ヘックドライバー S	20.7 mm	400-000S	401-000S	6,500 円
ヘックドライバー L	29.7 mm	400-000L	401-000L	6,500 円