


リリースドライバー

インプラントフィクスチャ埋入後、インプラントホルダーの解除をスパナではなく、手指で行なうためのインストゥルメントです。骨質が柔らかいケースやG B R 併用などで初期固定が取りにくいケースに最適です。症例により選択可能な2サイズをラインナップ致しました。

医療機器製造販売届出番号 20B1X00007000047
 歯科用インプラント手術器具 (一般医療機器)
 製造販売元 株式会社 ヨシオカ

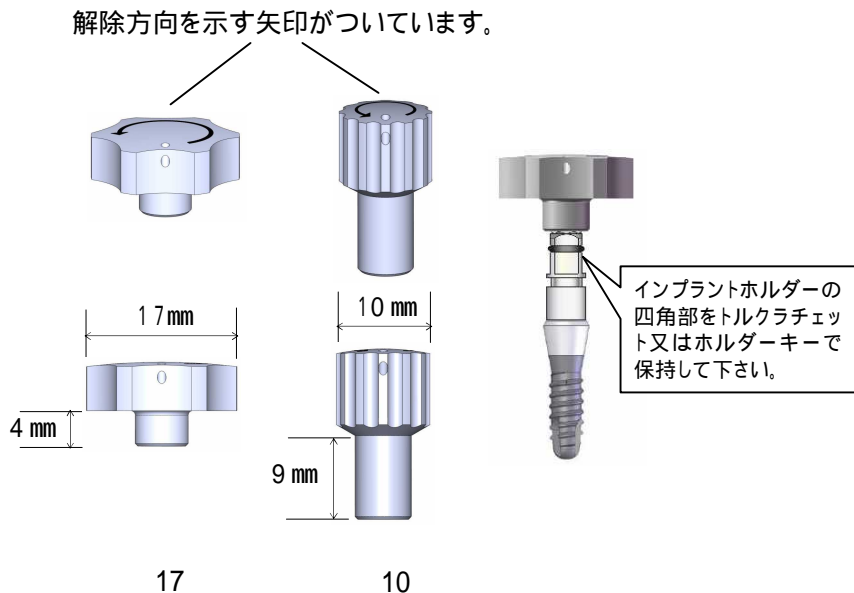

⚠️ ご注意

ホルダー付インプラントボディについて、製造工程でのインプラントホルダー組付けトルクを、2010年1月出荷分より、20Ncm から 10Ncm へ変更しております。変更前のボディにつきましては、リリースドライバーでの解除が困難な場合がございますので、スパナをご使用下さいますようお願い致します。

リリースドライバー

サイズ	商品コード	価格
10	4 U D -1000	9,000 円
17	4 U D -0000	12,000 円

(原材料) ステンレス