


2009年4月25日

お客様各位

 **PLATON JAPAN**
株式会社プラトンジャパン

トランスファーコーピング OP 販売終了のお知らせ

誠に勝手ながら、「トランスファーコーピング NE (ノエグ-ジック)」の販売開始にともない、従来の「トランスファーコーピング OP」の販売を終了させていただきます。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解を賜りますよう、何卒宜しく御願い申し上げます。

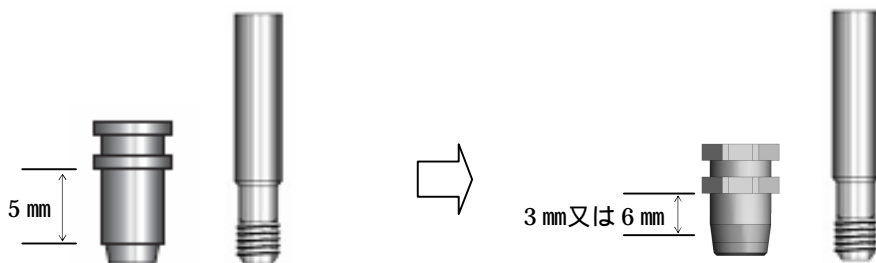

トランスファーコーピング OP

トランスファーコーピング NE

隣在歯やコーピング同士の干渉を防ぐためフィン部の形状を変更致しました。

本品はプラトンインプラント Type に使用するほか、Type Pro において、複数歯で平行性がとりにくいケースでの印象採得においても使用可能です。



| サイズ | 商品コード | G | 付属セットスクリュー | 価格 |
|-----|----------|--------|------------|---------------|
| S | TOP-0300 | 3.0 mm | H12 | 8,000 円 / セット |
| L | TOP-0600 | 6.0 mm | H15 | 8,000 円 / セット |

医療機器製造販売届出番号：20B1X00007000045

ご注意

本品を Type Pro に使用する場合は、アバットメントの選択に注意が必要です。口腔内のインプラントボディと模型上のトランスファーレプリカ Pro のインターナルヘックスの位置関係が再現されないため、Type Pro 専用のアバットメントを使用される場合は、六角部分を削り取りトランスファーインデックスを作成する必要があります。